

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Квинсента

раствор для подкожного введения, 0,25/0,5 мг/доза, 1 мг/доза

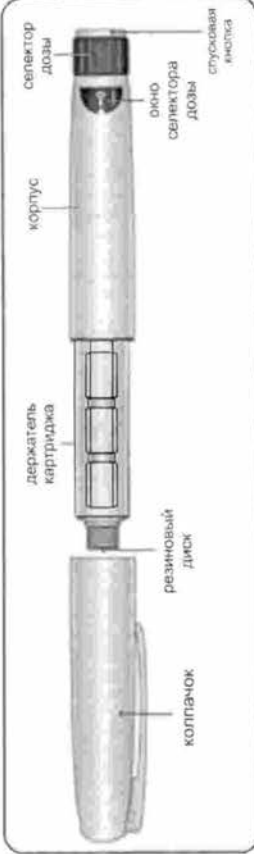
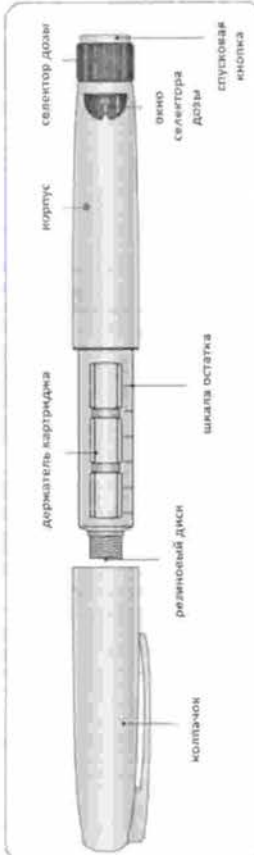
АО «Биохимик», Россия
ООО «Завод Медсинтез», Россия

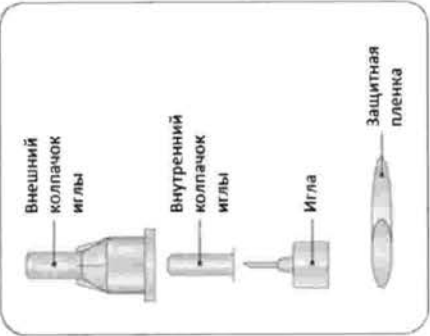
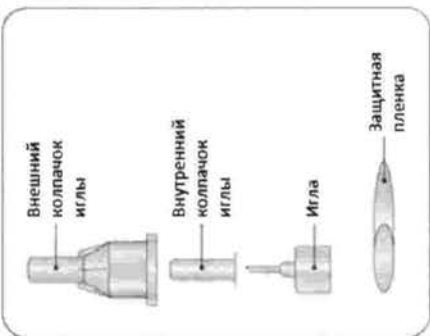
Изменение № 1

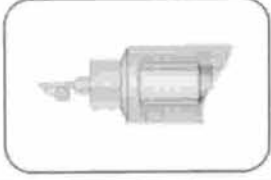
Дата внесения Изменения « 01.11.2023 » 20__ г.



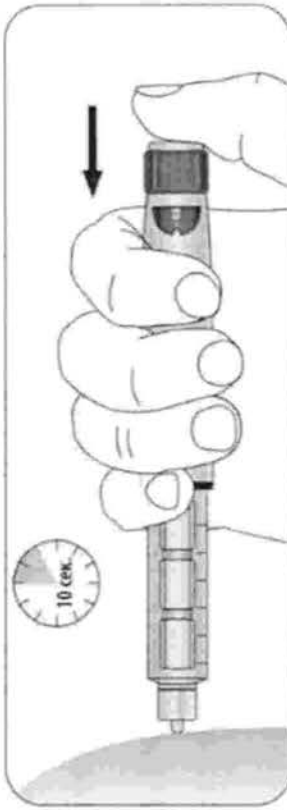
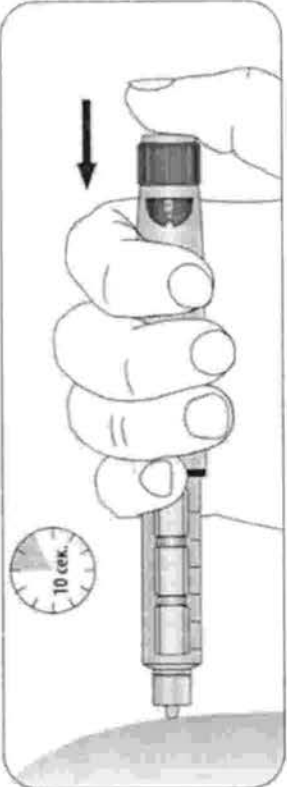
Старая редакция	Новая редакция
Руководство по использованию предварительно заполненной мультидозовой одноразовой шприц-ручки для препарата Квинсента, раствор для подкожного введения, 0,25/0,5 мг/доза	Руководство по использованию предварительно заполненной мультидозовой одноразовой шприц-ручки для препарата Квинсента, раствор для подкожного введения, 0,25/0,5 мг/доза

Новая редакция	Старая редакция
Предварительно заполненная мультидозовая одноразовая шприц-ручка (далее «шприц-ручка») предназначена для введения препарата Квинсента, раствор для подкожного введения, 0,25/0,5 мг/доза. Совместима с любыми иглами для шприц-ручек. Внимание! Иглы могут не входить в комплект с препаратом. Пожалуйста, ознакомьтесь с пошаговым руководством по применению шприц-ручек. Несоблюдение инструкции может привести к набору неточной дозы препарата.	Предварительно заполненная мультидозовая одноразовая шприц-ручка (далее «шприц-ручка») предназначена для введения препарата Квинсента, раствор для подкожного введения, 0,25/0,5 мг/доза. Совместима с любыми иглами для шприц-ручек. Внимание! Иглы могут не входить в комплект с препаратом. Пожалуйста, ознакомьтесь с пошаговым руководством по применению шприц-ручек. Несоблюдение инструкции может привести к набору неточной дозы препарата.
<u>Состав шприц-ручки</u>	<u>Состав шприц-ручки</u>
 Рис. 1	 Рис. 1
<u>1. Подготовка к применению</u> А. Потяните колпачок шприц-ручки, чтобы снять его. Не снимайте этикетку с шприц-ручки. Б. Снимите защитную пленку с новой иглы (рис. 2).	<u>1. Подготовка к применению</u> А. Потяните колпачок шприц-ручки, чтобы снять его. Не снимайте этикетку с шприц-ручки. Б. Снимите защитную пленку с новой иглы (рис. 2).

Новая редакция	Старая редакция
 Внешний колпачок иглы Внутренний колпачок иглы Игла Защитная пленка Рис. 2. Части иглы	 Внешний колпачок иглы Внутренний колпачок иглы Игла Защитная пленка Рис. 2. Части иглы
Прикрутите иглу непосредственно к держателю картриджа (рис. 3).	Прикрутите иглу непосредственно к держателю картриджа (рис. 3).
 Рис. 3	 Рис. 3
Снимите внешний, затем внутренний колпачки иглы (рис. 4). Не выбрасывайте внешний колпачок.	Снимите внешний, затем внутренний колпачки иглы (рис. 4). Не выбрасывайте внешний колпачок.
 Рис. 4	 Рис. 4
В. Важно перед первым применением подготовить шприц-ручку к использованию, чтобы удалить весь воздух,	В. Важно перед первым применением подготовить шприц-ручку к использованию, чтобы удалить весь воздух,

Старая редакция	Новая редакция
который может быть внутри картриджа и иглы. Установите минимальную дозу на селекторе дозы (рис. 5).  Рис. 5	который может быть внутри картриджа и иглы. Медленно поворачивая селектор дозы, установите в окне селектора дозы символ «-», следующий после отметки 0 (рис. 5).  Рис. 5
Держите шприц-ручку иглой вверх. Нажмите спусковую кнопку и продолжайте давить на нее до тех пор, пока нулевая отметка в окне селектора дозы не совместится с указателем на корпусе шприц-ручки. Если после этого на конце иглы не появился препарат, то повторите действия согласно пункту 1.В до появления препарата на конце иглы (рис. 6).  Рис. 6	Держите шприц-ручку иглой вверх. Нажмите спусковую кнопку и продолжайте давить на нее до тех пор, пока не появится капля препарата или нулевая отметка в окне селектора дозы не совместится с указателем на корпусе шприц-ручки. Если после этого на конце иглы не появился препарат, то повторите действия согласно пункту 1.В до появления препарата на конце иглы (рис. 6).  Рис. 6

Старая редакция	Новая редакция
Теперь шприц-ручка готова к применению. Если селектор дозы не вернется к нулевой отметке и препарат не появится на кончике иглы, то возможно, что используемая игла шприц-ручки непроходима. В этом случае следует удалить старую иглу и заменить на новую. Затем повторите действия пункта 1.В.	Теперь шприц-ручка готова к применению. Если селектор дозы не вернется к нулевой отметке и препарат не появится на кончике иглы, то возможно, что используемая игла шприц-ручки непроходима. В этом случае следует удалить старую иглу и заменить на новую. Затем повторите действия пункта 1.В.
<u>2. Введение дозы</u>	<u>2. Введение дозы</u>
А. Убедитесь, что указатель на корпусе шприц-ручки показывает на нулевую отметку в окне селектора дозы. Наберите необходимую дозировку: 0,25 мг или 0,5 мг.	А. Убедитесь, что указатель на корпусе шприц-ручки показывает на нулевую отметку в окне селектора дозы. Наберите необходимую дозировку: 0,25 мг или 0,5 мг.
Ошибочный набор дозы препарата в шприц-ручке может быть изменен вращением селектора набора дозы в любом направлении.	Ошибочный набор дозы препарата в шприц-ручке может быть изменен вращением селектора набора дозы в любом направлении.
Перед инъекцией убедитесь, что указатель на корпусе показывает на нужное число единиц в окне селектора дозы.	Перед инъекцией убедитесь, что указатель на корпусе показывает на нужное число единиц в окне селектора дозы.
Б. Введите иглу, пользуясь техникой инъекции, рекомендованной Вашим лечащим врачом. Нажмите спусковую кнопку и продолжайте давить на нее до тех пор, пока нулевая отметка в окне селектора дозы не совместится с	Б. Введите иглу, пользуясь техникой инъекции, рекомендованной Вашим лечащим врачом. Нажмите спусковую кнопку и продолжайте давить на нее до тех пор, пока нулевая отметка в окне селектора дозы не совместится с

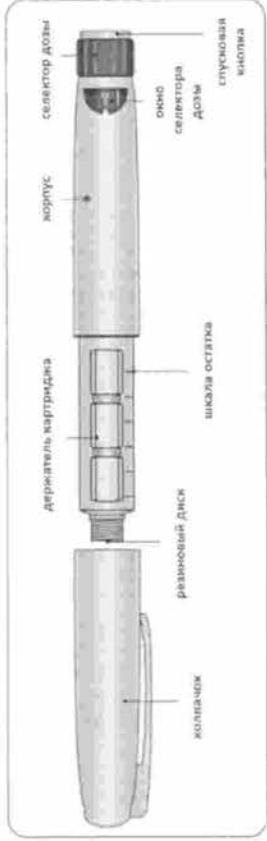
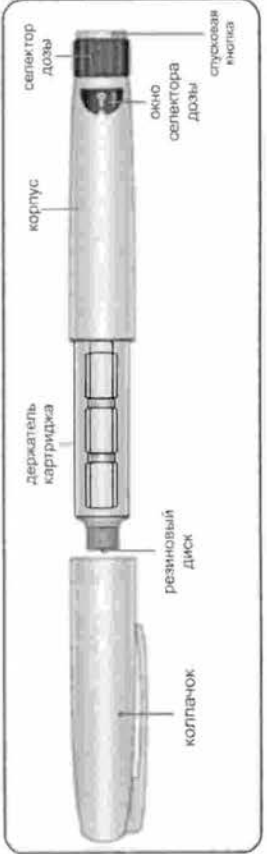
Старая редакция	Новая редакция
указателем на корпусе шприц-ручки. Посчитайте до 10 и вытащите иглу из кожи (рис. 7).	указателем на корпусе шприц-ручки. Посчитайте до 10 и вытащите иглу из кожи (рис. 7).
 Рис. 7	 Рис. 7
Во время введения набранной дозы осуществляйте давление на спусковую кнопку большим пальцем кисти руки строго вдоль продольной оси шприц-ручки, не касаясь вращающихся деталей шприц-ручки, в т.ч. селектора дозы.	Во время введения набранной дозы осуществляйте давление на спусковую кнопку большим пальцем кисти руки строго вдоль продольной оси шприц-ручки, не касаясь вращающихся деталей шприц-ручки, в т.ч. селектора дозы.
Если селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совместится с указателем – это означает, что Вы не получили необходимую дозу препарата. При этом селектор дозы показывает число единиц, которое должно быть введено до полной дозы препарата.	Если селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совместится с указателем – это означает, что Вы не получили необходимую дозу препарата. При этом селектор дозы показывает число единиц, которое должно быть введено до полной дозы препарата.
3. Удаление иглы Осторожно наденьте на иглу внешний колпачок и открутите иглу от шприц-ручки (рис. 8).	3. Удаление иглы Осторожно наденьте на иглу внешний колпачок и открутите иглу от шприц-ручки (рис. 8).

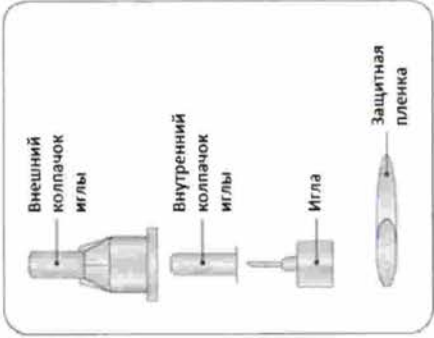
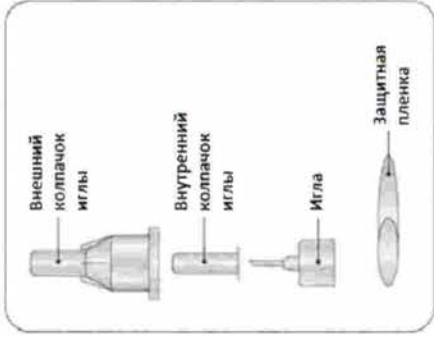
Новая редакция	Старая редакция
 Рис. 8	 Рис. 8
Всегда проверяйте, чтобы игла была отсоединена. Наденьте колпачок шприц-ручки на место. Утилизация использованных игл должна производиться в соответствии с рекомендациями работников здравоохранения и санитарно-эпидемиологическими нормами.	Всегда проверяйте, чтобы игла была отсоединена. Наденьте колпачок шприц-ручки на место. Утилизация использованных игл должна производиться в соответствии с рекомендациями работников здравоохранения и санитарно-эпидемиологическими нормами.
<u>4. Замена иглы</u>	<u>4. Замена иглы</u>
При каждой замене иглы следуйте пунктам 1.Б и 1.В.	При каждой замене иглы следуйте пунктам 1.Б и 1.В.
<u>Меры предосторожности</u>	<u>Меры предосторожности</u>
• Шприц-ручка должна использоваться только после консультации с Вашим лечащим врачом. • Для предотвращения инфицирования шприц-ручка должна использоваться только одним пациентом и не передаваться другому лицу.	• Шприц-ручка должна использоваться только после консультации с Вашим лечащим врачом. • Для предотвращения инфицирования шприц-ручка должна использоваться только одним пациентом и не передаваться другому лицу.
• В случае загрязнения резинового диска картриджа продезинфицируйте его антисептиком, дождитесь полного высыхания диска перед установкой иглы.	• В случае загрязнения резинового диска картриджа продезинфицируйте его антисептиком, дождитесь полного высыхания диска перед установкой иглы.

Новая редакция	Старая редакция
Если есть подозрения, что используемый экземпляр шприц-ручки поврежден, следует использовать новую шприц-ручку.	Если есть подозрения, что используемый экземпляр шприц-ручки поврежден, следует использовать новую шприц-ручку.
Перед каждой инъекцией убедитесь, что шприц-ручка содержит нужный препарат, прописанный Вашим лечащим врачом.	Перед каждой инъекцией убедитесь, что шприц-ручка содержит нужный препарат, прописанный Вашим лечащим врачом.
Прочитайте и следуйте инструкции по медицинскому применению препарата. Всегда проверяйте, что шприц-ручка подготовлена к использованию в соответствии с руководством. Нарушение процедуры подготовки шприц-ручки к использованию может привести к введению неточной дозы препарата.	Прочитайте и следуйте инструкции по медицинскому применению препарата. Всегда проверяйте, что шприц-ручка подготовлена к использованию в соответствии с руководством. Нарушение процедуры подготовки шприц-ручки к использованию может привести к введению неточной дозы препарата.
Для каждой инъекции используйте новую иглу. Сразу после инъекции игла должна быть снята и утилизирована безопасным способом. Если игла останется на шприц-ручке, это может привести к ее засорению и повлиять на точность введения дозы.	Для каждой инъекции используйте новую иглу. Сразу после инъекции игла должна быть снята и утилизирована безопасным способом. Если игла останется на шприц-ручке, это может привести к ее засорению и повлиять на точность введения дозы.
Если после отсоединения иглы от шприц-ручки Вы обнаружили утечку препарата, возможно, Вы ввели требуемое	Если после отсоединения иглы от шприц-ручки Вы обнаружили утечку препарата, возможно, Вы ввели требуемое

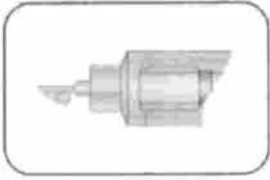
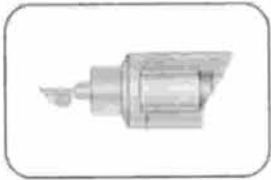
Старая редакция	Новая редакция
количество препарата не полностью. Не пытайтесь восполнить недополученную дозу препарата второй инъекцией, так как в этом случае повышается риск передозировки препарата (см. раздел «Передозировка»).	количество препарата не полностью. Не пытайтесь восполнить недополученную дозу препарата второй инъекцией, так как в этом случае повышается риск передозировки препарата (см. раздел «Передозировка»).
<u>Хранение и утилизация</u>	<u>Хранение и утилизация</u>
• Шприц-ручка должна всегда храниться со снятой иглой и колпачке.	• Шприц-ручка должна всегда храниться со снятой иглой и в колпачке.
• Шприц-ручку нельзя использовать, если она находилась вне холодильника больше времени, указанного в инструкции по медицинскому применению.	• Шприц-ручку нельзя использовать, если она находилась вне холодильника больше времени, указанного в инструкции по медицинскому применению.
• Используемую или переносимую в качестве запасной шприц-ручку с препаратом храните при температуре не выше 30 °C или при температуре от 2 до 8 °C (в холодильнике) в течение 6 недель. Не замораживайте. После использования закрывайте шприц-ручку колпачком для защиты от света.	• Используемую или переносимую в качестве запасной шприц-ручку с препаратом храните при температуре не выше 30 °C или при температуре от 2 до 8 °C (в холодильнике) в течение 6 недель. Не замораживайте. После использования закрывайте шприц-ручку колпачком для защиты от света.
• Очищайте шприц-ручку влажной тканью. Не погружайте шприц-ручку в воду.	• Очищайте шприц-ручку влажной тканью. Не погружайте шприц-ручку в воду.
• Шприц-ручки, которые не находятся в употреблении,	• Шприц-ручки, которые не находятся в употреблении,

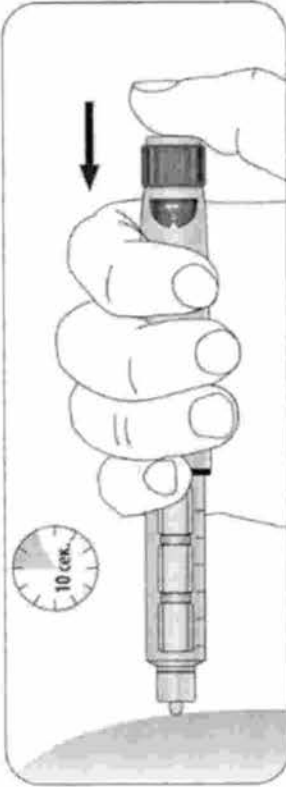
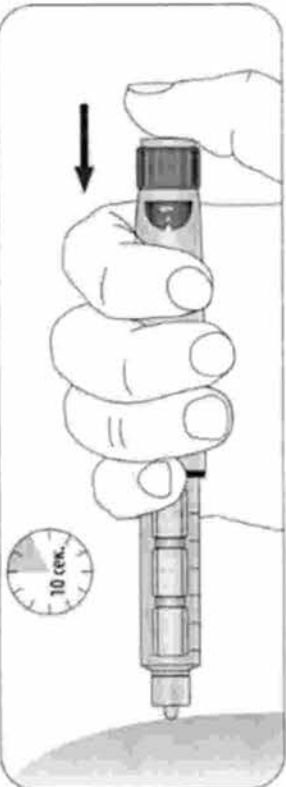
Старая редакция	Новая редакция
должны храниться в холодильнике при температуре от 2 до 8 °С, но не рядом с морозильной камерой. Защищайте от света. Не замораживайте. • Храните шприц-ручки в местах, недоступных для детей. • Утилизируйте использованные иглы в их защитных от прокалывания колпачках или как рекомендовано лечащим врачом. Пустые шприц-ручки не должны использоваться повторно. Утилизируйте использованные шприц-ручки без прикрепленных к ним игл и в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Данное руководство вкладывается в упаковку с шприц-ручками с раствором для подкожного введения, 0,25/0,5 мг/доза.	должны храниться в холодильнике при температуре от 2 до 8 °С, но не рядом с морозильной камерой. Защищайте от света. Не замораживайте. • Храните шприц-ручки в местах, недоступных для детей. • Утилизируйте использованные иглы в их защитных от прокалывания колпачках или как рекомендовано лечащим врачом. Пустые шприц-ручки не должны использоваться повторно. Утилизируйте использованные шприц-ручки без прикрепленных к ним игл и в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Данное руководство вкладывается в упаковку с шприц-ручками с раствором для подкожного введения, 0,25/0,5 мг/доза.

Старая редакция	Новая редакция
Руководство по использованию предварительно заполненной мультидозовой одноразовой шприц-ручки для препарата Квинсента, раствор для подкожного введения, 1 мг/доза Предварительно заполненная мультидозовая одноразовая шприц-ручка (далее «шприц-ручка») предназначена для введения препарата Квинсента, раствор для подкожного введения, 1 мг/доза. Совместима с любыми иглами для шприц-ручек. Внимание! Иглы могут не входить в комплект с препаратом. Пожалуйста, ознакомьтесь с пошаговым руководством по применению шприц-ручек. Несоблюдение инструкции может привести к набору неточной дозы препарата. <u>Состав шприц-ручки</u>  Рис. 1	Руководство по использованию предварительно заполненной мультидозовой одноразовой шприц-ручки для препарата Квинсента, раствор для подкожного введения, 1 мг/доза Предварительно заполненная мультидозовая одноразовая шприц-ручка (далее «шприц-ручка») предназначена для введения препарата Квинсента, раствор для подкожного введения, 1 мг/доза. Совместима с любыми иглами для шприц-ручек. Внимание! Иглы могут не входить в комплект с препаратом. Пожалуйста, ознакомьтесь с пошаговым руководством по применению шприц-ручек. Несоблюдение инструкции может привести к набору неточной дозы препарата. <u>Состав шприц-ручки</u>  Рис. 1

Новая редакция	Старая редакция
1. Подготовка к применению А. Потяните колпачок шприц-ручки, чтобы снять его. Не снимайте этикетку с шприц-ручки. Б. Снимите защитную пленку с новой иглы (рис. 2).  Внешний колпачок иглы Внутренний колпачок иглы Игла Защитная пленка Рис. 2. Части иглы Прикрутите иглу непосредственно к держателю картриджа (рис. 3).  Рис. 3 Снимите внешний, затем внутренний колпачки иглы (рис. 4). Не выбрасывайте внешний колпачок.	1. Подготовка к применению А. Потяните колпачок шприц-ручки, чтобы снять его. Не снимайте этикетку с шприц-ручки. Б. Снимите защитную пленку с новой иглы (рис. 2).  Внешний колпачок иглы Внутренний колпачок иглы Игла Защитная пленка Рис. 2. Части иглы Прикрутите иглу непосредственно к держателю картриджа (рис. 3).  Рис. 3 Снимите внешний, затем внутренний колпачки иглы (рис. 4). Не выбрасывайте внешний колпачок.

Старая редакция	Новая редакция
Рис. 4 В. Важно перед первым применением подготовить предварительно заполненную шприц-ручку к использованию, чтобы удалить весь воздух, который может быть внутри картриджа и иглы. Установите дозу на селекторе дозы (рис. 5). Рис. 5	Рис. 4 В. Важно перед первым применением подготовить предварительно заполненную шприц-ручку к использованию, чтобы удалить весь воздух, который может быть внутри картриджа и иглы. Медленно поворачивая селектор дозы, установите в окне селектора дозы символ «-», следующий после отметки 0 (рис. 5). Рис. 5
Держите шприц-ручку иглой вверх. Нажмите спусковую кнопку и продолжайте давить на нее до тех пор, пока нулевая отметка в окне селектора дозы не совместится с указателем на корпусе шприц-ручки. Если после этого на конце иглы не появился препарат, то повторите действия согласно пункту 1.В	Держите шприц-ручку иглой вверх. Нажмите спусковую кнопку и продолжайте давить на нее до тех пор, пока не появится капля препарата или нулевая отметка в окне селектора дозы не совместится с указателем на корпусе шприц-ручки. Если после этого на конце иглы не появился препарат,

Старая редакция	Новая редакция
до появления препарата на конце иглы (рис. 6).  Рис. 6 Теперь шприц-ручка готова к применению. Если селектор дозы не вернется к нулевой отметке и препарат не появится на кончике иглы, то возможно, что используемая игла шприц-ручки непроходима. В этом случае следует удалить старую иглу и заменить на новую. Затем повторите действия пункта 1.В. <u>2. Введение дозы</u> А. Убедитесь, что указатель на корпусе предварительно заполненной шприц-ручки показывает на нулевую отметку в окне селектора дозы. Наберите необходимую дозировку: 1 мг. Перед инъекцией убедитесь, что указатель на корпусе показывает на нужное число единиц в окне селектора дозы.	то повторите действия согласно пункту 1.В до появления препарата на конце иглы (рис. 6).  Рис. 6 Теперь шприц-ручка готова к применению. Если селектор дозы не вернется к нулевой отметке и препарат не появится на кончике иглы, то возможно, что используемая игла шприц-ручки непроходима. В этом случае следует удалить старую иглу и заменить на новую. Затем повторите действия пункта 1.В. <u>2. Введение дозы</u> А. Убедитесь, что указатель на корпусе предварительно заполненной шприц-ручки показывает на нулевую отметку в окне селектора дозы. Наберите необходимую дозировку: 1 мг. Перед инъекцией убедитесь, что указатель на корпусе показывает на нужное число единиц в окне селектора дозы.

Старая редакция	Новая редакция
Б. Введите иглу, пользуясь техникой инъекции, рекомендованной Вашим лечащим врачом. Нажмите спусковую кнопку и продолжайте давить на нее до тех пор, пока нулевая отметка в окне селектора дозы не совместится с указателем на корпусе шприц-ручки. Посчитайте до 10 и вытащите иглу из кожи (рис. 7).  Рис. 7	Б. Введите иглу, пользуясь техникой инъекции, рекомендованной Вашим лечащим врачом. Нажмите спусковую кнопку и продолжайте давить на нее до тех пор, пока нулевая отметка в окне селектора дозы не совместится с указателем на корпусе шприц-ручки. Посчитайте до 10 и вытащите иглу из кожи (рис. 7).  Рис. 7
Во время введения набранной дозы осуществляйте давление на спусковую кнопку большим пальцем кисти руки строго вдоль продольной оси шприц-ручки, не касаясь вращающихся деталей шприц-ручки, в т.ч. селектора дозы. Если селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совместится с указателем, – это означает, что Вы не получили необходимую дозу препарата.	Во время введения набранной дозы осуществляйте давление на спусковую кнопку большим пальцем кисти руки строго вдоль продольной оси шприц-ручки, не касаясь вращающихся деталей шприц-ручки, в т.ч. селектора дозы. Если селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совместится с указателем – это означает, что Вы не получили необходимую дозу препарата.

Старая редакция	Новая редакция
<u>3. Удаление иглы</u> Осторожно наденьте на иглу внешний колпачок и открутите иглу от шприц-ручки (рис. 8).  Рис. 8 Всегда проверяйте, чтобы игла была отсоединена. Наденьте колпачок шприц-ручки на место. Утилизация использованных игл должна производиться в соответствии с рекомендациями работников здравоохранения и санитарно-эпидемиологическими нормами. <u>4. Замена иглы</u> При каждой замене иглы следуйте пунктам 1.Б и 1.В. <u>Меры предосторожности</u> • Шприц-ручка должна использоваться только после консультации с Вашим лечащим врачом. • Для предотвращения инфицирования шприц-ручка должна использоваться только одним пациентом и не передаваться другому лицу.	<u>3. Удаление иглы</u> Осторожно наденьте на иглу внешний колпачок и открутите иглу от шприц-ручки (рис. 8).  Рис. 8 Всегда проверяйте, чтобы игла была отсоединена. Наденьте колпачок шприц-ручки на место. Утилизация использованных игл должна производиться в соответствии с рекомендациями работников здравоохранения и санитарно-эпидемиологическими нормами. <u>4. Замена иглы</u> При каждой замене иглы следуйте пунктам 1.Б и 1.В. <u>Меры предосторожности</u> • Шприц-ручка должна использоваться только после консультации с Вашим лечащим врачом. • Для предотвращения инфицирования шприц-ручка должна использоваться только одним пациентом и не передаваться другому лицу.

Старая редакция	Новая редакция
- В случае загрязнения резинового диска картриджа продезинфицируйте его антисептиком, дождитесь полного высыхания диска перед установкой иглы. - Если есть подозрения, что используемый экземпляр шприц-ручки поврежден, следует использовать новую шприц-ручку. - Перед каждой инъекцией убедитесь, что шприц-ручка содержит нужный препарат, прописанный Вашим лечащим врачом. - Прочитайте и следуйте инструкции по медицинскому применению препарата. Всегда проверяйте, что шприц-ручка подготовлена к использованию в соответствии с руководством. - Нарушение процедуры подготовки шприц-ручки к использованию может привести к введению неточной дозы препарата. - Для каждой инъекции используйте новую иглу. Сразу после инъекции игла должна быть снята и утилизирована безопасным способом. Если игла останется на шприц-ручке, это может привести к ее засорению и повлиять на точность	- В случае загрязнения резинового диска картриджа продезинфицируйте его антисептиком, дождитесь полного высыхания диска перед установкой иглы. - Если есть подозрения, что используемый экземпляр шприц-ручки поврежден, следует использовать новую шприц-ручку. - Перед каждой инъекцией убедитесь, что шприц-ручка содержит нужный препарат, прописанный Вашим лечащим врачом. - Прочитайте и следуйте инструкции по медицинскому применению препарата. Всегда проверяйте, что шприц-ручка подготовлена к использованию в соответствии с руководством. - Нарушение процедуры подготовки шприц-ручки к использованию может привести к введению неточной дозы препарата. - Для каждой инъекции используйте новую иглу. Сразу после инъекции игла должна быть снята и утилизирована безопасным способом. Если игла останется на шприц-ручке, это может привести к ее засорению и повлиять на точность

Старая редакция	Новая редакция
введения дозы. Если после отсоединения иглы от шприц-ручки Вы обнаружили утечку препарата, возможно, Вы ввели требуемое количество препарата не полностью. Не пытайтесь восполнить недополученную дозу препарата второй инъекцией, так как в этом случае повышается риск передозировки препарата (см. раздел «Передозировка»).	введения дозы. Если после отсоединения иглы от шприц-ручки Вы обнаружили утечку препарата, возможно, Вы ввели требуемое количество препарата не полностью. Не пытайтесь восполнить недополученную дозу препарата второй инъекцией, так как в этом случае повышается риск передозировки препарата (см. раздел «Передозировка»).
<u>Хранение и утилизация</u>	<u>Хранение и утилизация</u>
Шприц-ручка должна всегда храниться со снятой иглой и в колпачке.	Шприц-ручка должна всегда храниться со снятой иглой и в колпачке.
Шприц-ручку нельзя использовать, если она находилась вне холодильника больше времени, указанного в инструкции по медицинскому применению.	Шприц-ручку нельзя использовать, если она находилась вне холодильника больше времени, указанного в инструкции по медицинскому применению.
Используемую или переносимую в качестве запасной шприц-ручку с препаратом храните при температуре не выше 30 °C или при температуре от 2 до 8 °C (в холодильнике) в течение 6 недель. Не замораживайте. После использования закрывайте шприц-ручку колпачком для защиты от света.	Используемую или переносимую в качестве запасной шприц-ручку с препаратом храните при температуре не выше 30 °C или при температуре от 2 до 8 °C (в холодильнике) в течение 6 недель. Не замораживайте. После использования закрывайте шприц-ручку колпачком для защиты от света.
Очищайте шприц-ручку влажной тканью.	Очищайте шприц-ручку влажной тканью.

Старая редакция	Новая редакция
Не погружайте шприц-ручку в воду. - Шприц-ручки, которые не находятся в употреблении, должны храниться в холодильнике при температуре от 2 до 8 °C, но не рядом с морозильной камерой. Защищайте от света. Не замораживайте. - Храните шприц-ручки в местах, недоступных для детей. - Утилизируйте использованные иглы в их защитных от прокалывания колпачках, или как рекомендовано лечащим врачом. Пустые шприц-ручки не должны использоваться повторно. Утилизируйте использованные шприц-ручки без прикрепленных к ним игл и в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Данное руководство вкладывается в упаковку с шприц-ручками с раствором для подкожного введения, 1 мг/доза.	Не погружайте шприц-ручку в воду. - Шприц-ручки, которые не находятся в употреблении, должны храниться в холодильнике при температуре от 2 до 8 °C, но не рядом с морозильной камерой. Защищайте от света. Не замораживайте. - Храните шприц-ручки в местах, недоступных для детей. - Утилизируйте использованные иглы в их защитных от прокалывания колпачках, или как рекомендовано лечащим врачом. Пустые шприц-ручки не должны использоваться повторно. Утилизируйте использованные шприц-ручки без прикрепленных к ним игл и в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Данное руководство вкладывается в упаковку с шприц-ручками с раствором для подкожного введения, 1 мг/доза.

Главный специалист отдела
регистрации и регуляторных отношений

О.В. Кучеренко

